


# Dedalo Mobile

## App per Android



Versione 1.0 gennaio 2017

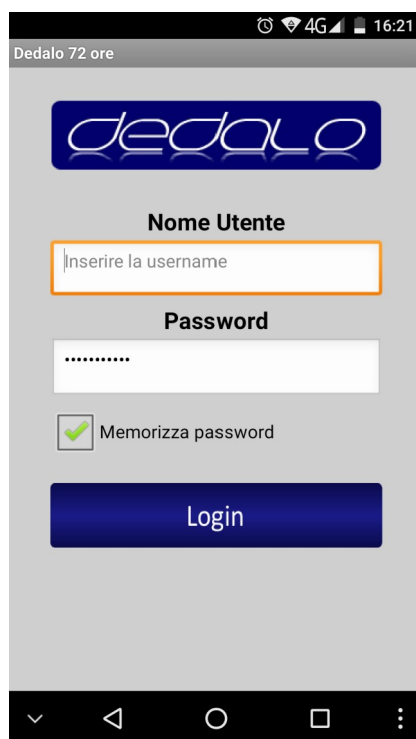

## Descrizione

L'app Dedalo Mobile, release 1.0, consente di monitorare il funzionamento dei dispositivi di telesoccorso, configurati su dedalo 72ore.

## Installazione

Dedalo Mobile richiede uno smartphone con sistema operativo android.

Per installare dedalo, accedere al proprio account su <http://dedalo.72ore.it> e cliccare la apposita voce del menu "APP ANDROID".

Si aprirà una finestra contenente un QR code.

Avviare sul proprio smartphone una app per leggere i QR code ed inquadrare il monitor del computer.

Una volta riconosciuto il codice, aprire il link, verrà scaricato il file di installazione "Dedalo.apk".

Avviare il file e confermare la procedura di installazione.

Al termine dell'installazione è possibile avviare l'app.




## Login

La prima operazione da fare, una volta avviata l'app dedalo, è l'autenticazione.

Inserire il nome utente e la password utilizzata per autenticarsi su dedalo 72 ore e premere Login

Se si vuole evitare di inserire ogni volta la password, selezionare l'opzione "*Memorizza la password*".

Nota: tale opzione rimane memorizzata solo nel telefono.

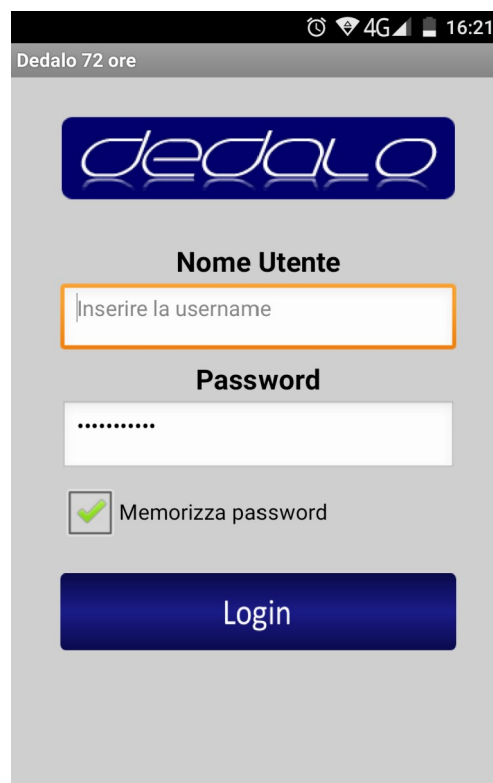


# Schermata Home



Nella schermata principale sono riprodotte le principali funzioni di monitoraggio di Dedalo.

## Sezione Monitor

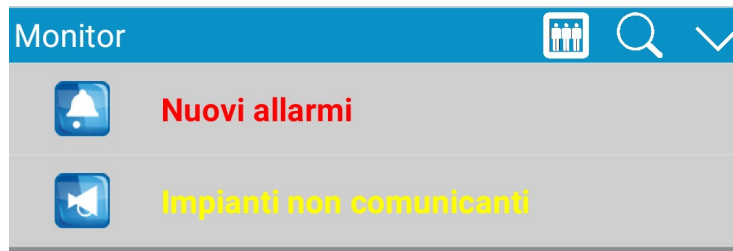

La sezione Monitor visualizza la presenza di nuovi allarmi, ovvero segnalazioni che necessitano di attenzione, e se vi sono impianti che non stanno comunicando da almeno 72 ore.

Cliccando i pulsanti "*visualizza nuovi allarmi*" o "*visualizza impianti non comunicanti*", verranno mostrate le relative selezioni nella lista eventi.

Premere il pulsante *Home*, con il logo dedalo in alto allo schermo, per tornare alla lista eventi iniziale.

## Ricerca eventi

Cliccando il pulsante Cerca Eventi, si apre il form contenente i filtri di ricerca.

Premere Cerca per avviare la ricerca

Premere Reset per svuotare i campi

The screenshot shows a mobile application interface for searching events. At the top, there is a blue header with the word 'Monitor' and three icons: a calendar, a magnifying glass, and a checkmark. Below the header, there are several input fields and buttons. On the left, there are two dropdown menus labeled 'Evento' and 'Impianto'. Below these are two date pickers labeled 'Data inizio - fine' with the dates '01/01/2000' and '17/1/2017'. Below the date pickers are two time pickers labeled 'Ora inizio - fine' with the times '0:00' and '23:59'. To the right of the time pickers are two checkboxes: 'Eventi aperti' and 'Eventi chiusi'. At the bottom right, there are two buttons: 'Reset' and 'Cerca'.

## Ricerca Impianti

Cliccare il pulsante cerca impianti per aprire la casella di ricerca .

Per cercare degli impianti, inserire un testo da ricercare e premere il pulsante con la lente di ingrandimento

The screenshot shows a mobile application interface for searching plants. At the top, there is a blue header with the word 'Monitor' and three icons: a calendar, a magnifying glass, and a checkmark. Below the header, there is a section titled 'Ricerca impianto'. Underneath this title is a search input field with the placeholder text 'digitare chiave di ricerca' and a magnifying glass icon to its right.

## Sezione Lista

Nella sezione lista vengono visualizzati gli eventi o gli impianti ricercati.

The screenshot displays a mobile application interface with two columns of data. The top right corner features a tab labeled "Eventi" with an upward-pointing arrow. The left column lists three events with IDs 1290733, 1290387, and 1290386, all dated 29-12-2016 and 28-12-2016, with times ranging from 12:14:40 to 15:45:04, and the location "MICROTSA - Telediagnosi". The right column lists three plants with IDs 1296563, 1290733, and 1290387, dated 12-01-2017 and 29-12-2016, with times 17:26:18 and 15:45:24, and the location "UFFICIO AURELIO GSM - Telediagnosi". At the bottom of each column are navigation icons (back, forward, search) and a page indicator "pag. 1 di 150".

Cliccando su un elemento visualizzato, evento o impianto, viene mostrata una finestra dei dettagli.

The "Dettagli Evento" dialog box displays the following information:  
Evento n.: 1290733  
Data : 29-12-2016 12:14:40  
Tipo : Telediagnosi  
Impianto : microTSA  
N.telefono : +390117079660  
Eventi in un ora: 3  
At the bottom, there are two buttons: "Impianto" and "Annulla".

The "Dettagli Impianto" dialog box displays the following information:  
Impianto n.: microTSA01  
Nome : microTSA  
Telefono : +390117079660  
Indirizzo : Via Reiss Romoli 194  
Torino  
At the bottom, there are two buttons: "Mappa" and "Annulla".

Dai dettagli dell'impianto si può accedere alla mappa.





Teledif Italia srl  
Via Reiss Romoli 194  
100148 Torino – Italy  
Tel. +39.011.7070707 – e-mail: [teledif@teledif.it](mailto:teledif@teledif.it)  
[www.teledif.it](http://www.teledif.it)